



Airwheel H3PS

NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS





Seznam balení

Vozík H3PS	1 ks	Nabíječka	1 ks
Manuál	1 ks	Příslušenství	1 ks
Opěrka nohou	1 ks		

Návod na rozbalení

1. Vyjmutí vozíku a kontrola příslušenství

Otevřete krabici a vyjměte invalidní vozík a opatrně jej položte na zem, vyjměte krabici s příslušenstvím. Krabice s příslušenstvím by měla obsahovat nabíječku, ovladač, návod, stahovací pásy, nářadí atd.

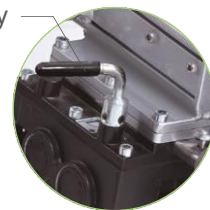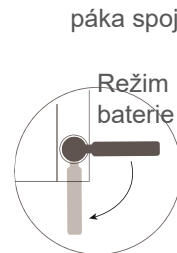

1-2

2. Instalace joysticku

Joystick lze instalovat na levou nebo pravou loketní opěrku v závislosti na zvyku uživatele.

- ① Upevněte slot joysticku šroubem a utáhněte šroub (obrázek 2-1).
- ② Vložte joystick do slotu a utáhněte šroub (obrázek 2-2).
- ③ Připojte kabely a upevněte je pomocí koleček (obrázek 2-3).



2-1

drážka pro joystick

sestava joysticku



2-2

šroub



2-3

Rozložení invalidního vozíku

Když se rozsvítí kontrolky na ovládacím panelu a uslyšíte pípnutí, uvolněte tlačítko a počkejte, až se invalidní vozík automaticky rozloží. Jakmile je zcela rozložen, stiskněte tlačítko ③ pro ukončení rozkládání a skládání. Zapněte hlavní vypínač ④ a začněte jej používat.

Poznámka:

Pokud dojde k jakémukoli problému kvůli špatným elektrickým součástem a invalidní vozík se nemůže rozložit a složit, musíte použít nástroje v krabici, odstranit šrouby v částech Obrázek 4-2 (umístěné v zadní části vozíku) a poté můžete ručně rozložit a složit invalidní vozík.

Instalace a použití

1. Pokyny pro vyjmutí baterie

Před vyjmutím bateriového boxu se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý. Odpojte konektor sběrnice baterie (jak je znázorněno na obrázku 1-1), stiskněte pružinovou svorku a vyjměte schránku baterie (obrázek 1-2). Když je baterie nainstalována, zasuňte bateriový box, dokud pružina nezapadne do bateriového boxu, a poté vložte zástrčku bateriové sběrnice do vstupu bateriové sběrnice. Poznámka:

1. Věnujte pozornost přední a zadní části bateriového boxu a umístěte jej tak, aby strana s nálepkou směřovala nahoru.
2. Při zapojování a odpojování sběrnice baterie zarovnejte slot pro kartu s výstupkem (jak je znázorněno na obrázku 1-3).




3. Nedotýkejte se hlavních kabelů nebo nabíjecího portu kovovými předměty, když je hlavní vypínač baterie zapnutý, aby nedošlo k poškození příslušenství a nebezpečí.

2. Vypínač

Když indikátor svítí, H3PS je zapnutý, a když nesvítí, H3PS je vypnutý. Tip: Vypněte prosím napájení, abyste zabránili přílišnému vybití baterie, pokud ji uživatel nepoužívá.


3. Pokyny pro nabíjení baterie

Před nabíjením nejprve připojte nabíječku baterií k vozíku a poté připojte ke zdroji střídavého proudu; Při nabíjení by měl být slot konektoru nabíječky (obrázek 3-1) zarovnan s vyčnívajícími částmi na nabíjecím portu (obrázek 3-2), zasuňte jej a poté utáhněte upevňovací kryt. Při demontáži nejprve uvolněte kryt a poté odpojte nabíječku.

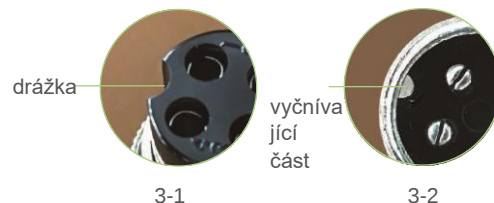

Přepínání levého a pravého joysticku

Odpojte kabel od joysticku (obrázek 4-1) a uvolněním šroubu sejměte joystick (obrázek 4-2). Odstraňte zárez na jedné straně joysticku (obrázek 4-3), otočte jej o 180 stupňů do druhé polohy na loketní opěrce, utáhněte šroub zajišťující joystick (obrázek 4-4) a poté vložte joystick do zárezu. Upevněte šroub (obrázek 4-5), znovu připojte kabeláž joysticku a nakonec upevněte kabel joysticku pomocí stahovacích pásek (obrázek 4-6).

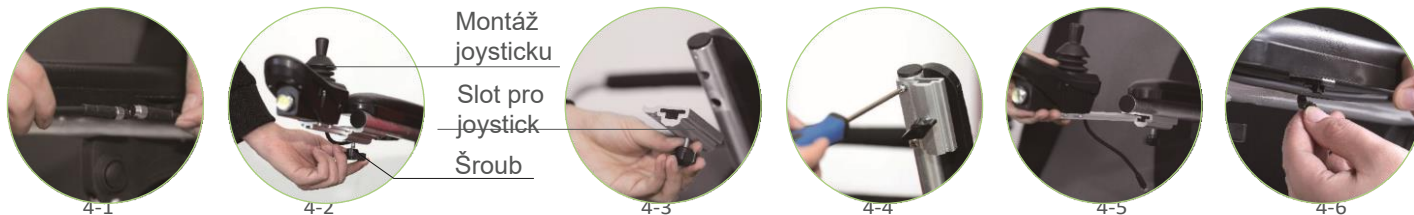

Varování

Vybité baterie prosím nevyhazujte, abyste neznečistili životní prostředí. Odpadní lithiová baterie produktu je určena k recyklaci společností nebo prodejcem a vládou určenými prodejny.


AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.; Paměťce 17, 397 01 Drhovele u Písku; +420 608 100 717, info@aktiv.cz, www.aktiv.cz

Technické specifikace

Hlavní technické parametry

Rozměry	955 x 605 x 855 mm	Hmotnost	~19.5kg (bez baterie)
Složená velikost	950 x 605 x 640 mm (velikost ovladače není součástí dodávky)	Nosnost	120 kg
Poloměr otáčení	1 m	Rám	6061 hliníková slitina
Standardní maximální rychlost	6 km/h	Schopnost lezení	cca 6°
Brzdný výkon	≤1.5 m	Kapacita svahu	cca 9°
Doba nabíjení	cca 5 h	Malá a velká baterie	158,8 Wh a 524 Wh
Redukční převodovka	Šnekový převodový převod 1:32	Použitelná teplota	-15°C ~50°C
Schopnost projít přes překážky	<25 mm	Schopnost projet příkopem	100 mm
Přední kolo	7 palců	Zadní kolo	10palcová nafukovací pneumatika
Hmotnost baterie	1,5 kg		
Motor	Kartáčový motor s pohonem 4 kol se spínačem spojky. Výkon: 200 W; napětí: 24 V; rychlost otáčení: 4000 ot./min		
Funkce automatického skládání	Ize automaticky složit a rozložit stisknutím tlačítka		

Návod k ovladači

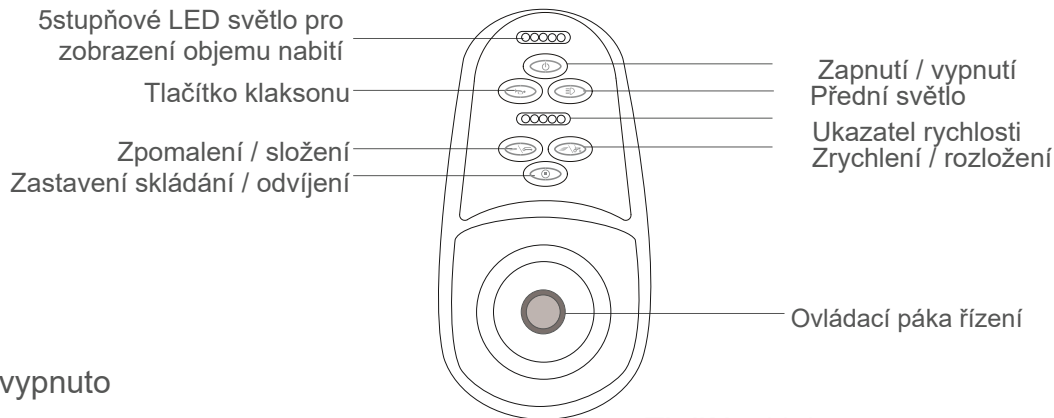

- Zapnuto / vypnuto

Ujistěte se, že je zapnuté tlačítko napájení bateriového boxu a že je invalidní vozík rozložený, poté stiskněte vypínač na ovladači, abyste byl připraven k jízdě nebo k dálkovému ovládání. Dalším stisknutím vypnete režim připravený k jízdě. Poznámka: Vypínač ovladače nelze zapnout, když je invalidní vozík zcela složený. Nejprve zapněte bateriový box, rozložte invalidní vozík a zapněte vypínač na ovladači, abyste se připravili k jízdě. Zapnuto / vypnuto

- Spínač předních světel

Ujistěte se, že napájení bateriového boxu i ovladač jsou zapnuté, poté stisknutím spínače světel zapněte přední světlo a dalším stisknutím jej vypnete.

- Tlačítko klaksonu

Na ovladači stiskněte toto tlačítko a spustí se bzučák; uvolněte jej a bzučák přestane znít.

- Převodový stupeň - zpomalení / složení

Při testu vypnutí stiskněte tlačítko na 2 sekundy, vozík přejde do režimu rozložení / složení. Chcete-li se přihlásit, uvolněte jej. V režimu prodloužení / smlouvy klikněte na tlačítko pro zastavení smlouvy, pokud se hroučí. Když je rozšíření zastaveno, kliknutím jej sbalíte. V režimu připravenosti, režimu dálkového ovládání a jízdního režimu kliknutím na tlačítko převodovky pořadíte.

Spustit + / Prodloužit

Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko na 2 sekundy, vozík přejde do režimu rozložení / složení. Pro prodloužení jej uvolněte. V režimu prodloužení / smlouvy kliknutím na tlačítko zastavíte prodloužení, pokud se prodlužuje. Když se najímání zastaví, kliknutím prodloužit. V režimu připravenosti, režimu dálkového ovládání a jízdního režimu kliknutím na tlačítko ozubeného kola zvýšíte rychlost.

5stupňové LED světlo pro indikátor baterie

Používá se k zobrazení procenta zbývajících kapacity baterie AH, každý segment představuje 20 % kapacity baterie, a když se segment nerozsvítí, znamená to, že bylo využito 20 % kapacity baterie; a když se dva segmenty nerozsvítí, znamená to, že je využito 40 % kapacity baterie atd.; Když se nerozsvítí 2-3 segmenty, možná budete muset nabít vozidlo, jelikož to prodlouží

životnost baterie. Pokud svítí pouze jeden segment, baterie je v pohotovosti a nepřetržitě používání je zakázáno a další používání může způsobit nadměrné vybití baterie, což zkrátí životnost baterie. Přesnost vzorkování 5 segmentů se časem používání baterie sníží.

Ukončete režim prodlužování/stahování

V režimu prodloužení / složení kliknutím na tlačítko zastavíte prodloužení nebo složení. Vstoupí do stavu uzavření.

Ukazatel rychlosti

V režimu připravenosti k jízdě stiskněte tlačítko plynu, LED indikátory rychlosti se rozsvítí jedna po druhé, stiskněte tlačítko nižší rychlosti, LED indikátory rychlosti jedna po druhé zhasnou.

- Stav vypnutí: zapojení obvodu je dokončeno, vypínač napájení baterie je zapnutý.
- Není však stisknuto tlačítko zapnutí / vypnutí na ovládací skřínce a kontrolka nesvítí. Pohotovostní stav: stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí na ovládací skříni, kontrolka se rozsvítí, ale bez jakékoli umělé činnosti.
- Stav jízdy: Stiskněte tlačítko on/off na ovládací skříni, rozsvítí se kontrolka a použijte ovládací páku k pohybu.

Jak používat ovladač

Ovladač se používá k ovládání vozíku a pohybu vpřed, vzad, otáčení vlevo a vpravo, zrychlování, zpomalování a zastavení. Po otevření hlavního vypínače zatlačte ovládací páku svisle dopředu a křeslo se posune dopředu. Když jej zatlačíte dále, rychlost je vyšší. Když uvolníte ovládací páku, vozidlo se zpomalí, když ji zcela uvolníte a ovládací páka je resetována, H3PS se zastaví a je ve stavu brzdění. Když zatáhnete ovládací páku zpět, vozík se posune dozadu. Když jej zatáhnete dále, rychlost zpětného chodu je vyšší. Když uvolníte ovládací páku, vozidlo se zpomalí a po úplném uvolnění se ovládací páka resetuje, zastaví a je ve stavu brzdění.

Podobně, když zatlačíte ovládací páku doleva nebo doprava, vozík se posune doleva nebo doprava. Když jej zatlačíte dále, má vyšší rychlost. Po uvolnění ovládací páky vozík zpomalí. Když ji zcela uvolníte a ovládací páka je resetována, vozidlo se zastaví a je ve stavu brzdění.



Vpřed:
Zatlačte
funkční
kolébku
dopředu a
invalidní vozík
se posune
dopředu.



Zpět:
Zatlačte
funkční
kolébku
dozadu a
invalidní vozík
se posune
dozadu.




Vlevo:
Zatlačte
funkční
kolébku
doleva a
invalidní vozík
se posune
doleva.



Vpravo:
Zatlačte
funkční
kolébku
doprava a
invalidní vozík
se posune
doprava.

Manipulace s páčkou spojky

Páčku spojky zatáhněte do otevřené polohy, aby brzda vozíku H3PS nefungovala a vozík bylo možné tlačít lidmi (je jedno, jestli je zapnuté nebo vypnuté, dá se tlačít), když páčku spojky přitáhnete k zavřené poloze, nikdo nebude moci tlačít H3PS.

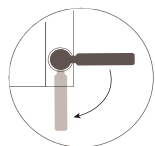

Režim baterie

Ruční režim




Páka spojky

Ruční režim, zatažením proti směru hodinových ručiček jej zpomalíte, Režim baterie, zatažením ve směru hodinových ručiček jej zpomalíte.



Režim baterie

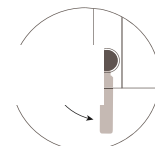

Ruční režim



páka spojky

Ruční režim, zatažením ve směru hodinových ručiček jej zpomalíte, Režim baterie, zatažením proti směru hodinových ručiček jej zpomalíte.



Páčka mechanické spojky musí být v elektrickém režimu, což znamená, že vozík je zabrzděn a uživatel může řídit. Je zakázáno používat tuto funkci, naklánění nahoru a dozadu pro zajištění bezpečnosti uživatele a vozíku.

Bezpečnost

Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a během prohlídky dodržujte požadavky na řízení. Prosím, nepoužívejte jej, dokud si uživatel pečlivě nepřečte uživatelskou příručku a dokud se dobře nenaučí ovládání. Prosím, nepůjčujte ji těm, kteří tento vozík nezvládají.

Důležitá poznámka:

Pochopení dovednosti před bezpečnou manipulací vyžaduje hodně cviku. Pokud nejste odborník nebo se nebudete řídit návodem k použití tohoto produktu, může to způsobit zranění nebo ztrátu majetku uživateli nebo jiným osobám. Naše společnost přebírá odpovědnost pouze za vady nebo poškození produktu a NEODPOVÍDÁME za zranění osob nebo ztrátu majetku související s používáním produktu.

Požadavky před použitím produktu:

1. Musíte znát a dodržovat místní dopravní předpisy.
2. H3PS patří mezi nemotorové vozidlo a je speciálně navrženo pro seniory a osoby s pohybovými problémy. Řidičský průkaz není podle dopravního zákona vyžadován, ale řidič H3PS musí dodržovat stejná dopravní pravidla, která platí pro chodce. Jezděte s ním v pruhu pro chodce nebo v pruhu pro cyklisty

① Musíte znát dopravní signály pro chodce.

② Při jízdě po silnici náhle neotáčejte.

3. Procvičte si provoz. Před prvním uvedením vozidla do provozu byste měli porozumět různým funkcím vozidla. Operace pohybu vpřed, zrychlení, zpomalení, zastavení, couvání, jízda do kopce, z kopce, zatáčení atd. byste měli nacvičovat na bezpečných místech s dobrými půdními podmínkami a s malým počtem lidí a poté, co všechny operace dobře zvládnete, může to řídit na cestách.

4. Při první cestě na silnici, je-li to možné, buďte v doprovodu osoby obeznámené s tímto vozidlem, aby byla zajištěna bezpečnost.

5. Lidé pod vlivem alkoholu, nadměrné únavy nebo s omezeným chováním či reaktivitou by toto elektrické křeslo neměli řídit, aby byla zaručena bezpečnost.
6. Ujistěte se prosím, že uživatel netrpí žádnou duševní nemocí nebo jinými nemocemi, které se mohou náhle objevit během jízdy, a uživatel by neměl mít pokud možno žádný stav ke ztrátě provozní schopnosti používat tuto autosedačku.
7. Pokud užíváte léky, poraďte se se svým lékařem, zda léky neovlivní vaše bezpečné užívání vozíku H3PS.
8. Měli byste zkontrolovat, zda je stav vozidla dobrý, například zda jsou brzdy a různé vlastnosti v pořádku, zda je vozík pevný, zda je baterie v dobrém stavu.
9. Toto vozidlo nesmíte upravovat bez povolení naší společnosti.

Nikdy nevystavujte elektrický systém tohoto vozidla vlhkému prostředí (jako je déšť, sníh nebo mlha), nemyjte toto vozidlo vodou, která poškodí elektrický systém. Pokud je vozík mokrá, lze jej používat až po vysušení a potvrzení pro dobrý stav.



Nejezděte s vozíkem za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je déšť, sníh, mlha, silný vítr, teplota nižší než -20 °C nebo vyšší než 40 °C. Elektrický systém může být za těchto podmínek poškozen a způsobit selhání ovládání.

Nejezděte s invalidním vozíkem po poušti, na pláži, na bahnité cestě, na silnici s kalužemi, na zledovatělé silnici, na hladké silnici nebo na slané a alkalické půdě, abyste ochránili jízdní vlastnosti tohoto vozidla.

Pozor během jízdy:

1. Tento vozík H3PS je určen pouze pro jednoho uživatele, neměl by vozit další cestující.
2. Tento produkt nelze použít jako zařízení pro přepravu nebo nakládání nákladu.
3. Uživatel by měl sedět na vozíku a ovládat ovládací páku rukou.
4. Neprovádějte hadovitou jízdu, vysokou rychlost a ostré zatáčky, nenaklánějte tělo, aby nedošlo k převrácení vozidla.
5. Na nerovném nebo nestabilním terénu (jako je tráva), rušných ulicích, parcích nákupních center dbejte zvýšené pozornosti, měli byste zpomalit a jet nízkou rychlostí.
6. Při řízení nesmíte používat mobilní telefony ani jiná bezdrátová komunikační zařízení. Tato zařízení lze použít pouze tehdy, když zastavíte křeslo na bezpečném místě a přerušíte přívod proudu. Při pohybu vzad dávejte pozor na provoz, davy kolem a musíte se pohybovat nízkou rychlostí.
7. Když opouštíte dveře, výtah, jeďte s ním pomalu, s tímto výrobkem je zakázáno používat eskalátor.
8. Při jízdě z kopce nebo do kopce věnujte zvýšenou pozornost, mějte zapnutý bezpečnostní pás a nízkou lineární rychlostí a nemůžete stoupat do svahu, který přesahuje limit sklonu výrobku.
9. Nejezděte vysokou rychlostí přes svahy se sklonem větším než 5 stupňů.
10. Nepokoušejte se překonat překážky nebo schody delší než 4 cm, může to způsobit, že se vozidlo nebude moci pohnout směrem dopředu a v tomto stavu byste měli okamžitě uvolnit ovládací páku.
11. Nepřejíždějte šířku příkopu větší než 10 cm, pokud je šířka příkopu menší než 10 cm, musíte dodržet vertikální směr.
12. Když projíždíte křižovatkou, musíte dodržovat dopravní předpisy, nepřejíždět ji na červenou, když přejíždíte vlakovou trať, musíte zastavit a sledovat okolní podmínky, pak ji pomalu přejíždět vpravo - úhel s kolejnicí vlaku, aby se zabránilo pádu do příkopové koleje.
13. Záměrně často nezapínat a vypínat hlavní vypínač a často nespouštět ani nezastavovat H3PS.
14. Nepůjčujte vozík osobě, která toto vozidlo nikdy nepoužívala nebo s ním není obeznámena; nedovolte dětem hrát si s vypínačem a ovládací pákou.
15. Nepoužívejte toto vozidlo s příliš velkým zatížením (více než 130 kg).



Za provozu, když uvolníte ovládací páku a páka se vrátí do střední polohy, pokud vozík stále nemůže zastavit pohyb, měli byste okamžitě vypnout hlavní vypínač a kontaktujte nejbližšího prodejce.

Péče po jízdě:

1. Pokud nebudete vozík nepřetržitě používat déle než 48 hodin, musíte vypnout hlavní vypínač.
2. Při přemísťování tohoto produktu do jiných vozidel se ujistěte, že je baterie zajištěna.

Baterie:

1. Nabijte přídatnou baterii: pokud tento produkt opustí továrnu na krátkou dobu, může jej uživatel použít přímo, pokud opustil továrnu na dlouhou dobu (2 měsíce nebo déle), baterie se během skladování ztrácí a při přepravě je nutné baterii před použitím doplnit nabitou. Metodou nabíjení je připojení originální zástrčky nabíječky produktu k portu nabíjení baterie a poté připojení k napájení AC100-240V po dobu 5 hodin, dokud indikátor nabíječky neukáže plnou kapacitu.
2. Normální nabíjení baterie: provoz elektrického křesla vybíjí baterie a po provozu produktu byste ji měli okamžitě nabít. Vypněte prosím napájení, když neřídíte.
3. Konektory bateriového boxu by měly být pevně upevněny podle požadavků (před expedicí z továrny je spojovací vedení bateriového boxu spolehlivě připojeno). Uvolnění nebo nesprávné připojení způsobí, že související části budou abnormální a povedou k vážnému poškození.
4. Lithiová baterie se nesmí přiblížit k vysokoteplotnímu zdroji tepla nebo ohni, baterie nelze házet do vody, je zakázáno vystavovat baterii vysoké teplotě na slunci.
5. Lithiová baterie je uvnitř řádně uzavřena, nerozebírejte ji ani nerozkládejte.
6. Odpadní baterie odevzdejte recyklační firmě nebo prodejci elektromobilů, nevyhazujte je, abyste předešli kontaminaci.

Použití nabíječek:

1. Pečlivě zkontrolujte, zda souhlasí jmenovité vstupní napětí nabíječky (AC100-240V) a síťové napětí.
2. Když je potřeba vozidlo nabít, musíte nejprve připojit nabíječku k baterii, poté připojit zásuvku pro nabíjení baterie pomocí střídavého proudu, a když indikátor nabíjení svítí červeně, což znamená, že se baterie nabíjí. když se kontrolka rozsvítí zeleně, potřebuje 15 minut k plnému nabití. Doba nabíjení je přibližně 2-4 hodiny (v závislosti na zbývajícím množství energie baterie).

Poznámky k nabíjení:

1. Během nabíjení ji umístěte na místo, kde se děti nemohou dotýkat.
2. Nedoporučuje se používat, když není plně nabitá.
3. Nepoužívejte nabíječku jiné značky, jiné typy baterií by tuto nabíječku neměly používat.
4. Nabíječka má uvnitř vysokonapěťový obvod, nerozebírejte ji.
5. Zabraňte pronikání kovu nebo kapaliny do nabíječky během používání a skladování a chraňte ji před pádem a nárazem, aby nedošlo k poškození.
6. Během nabíjení na nabíječku nic nepokládáte.
7. Před uskladněním vyžaduje plné nabití a vypnutí napájení. Nabíjte jej každé tři měsíce.

Jak řídit tento vozík H3PS:

1. Zapněte hlavní vypínač.
2. Řidič by si měl po usednutí na sedadlo zapnout bezpečnostní pás.
3. Zapněte spínač ovladače a počkejte 1 sekundu, LED displej se rozsvítí.
4. Zatlačte kolébku pomalu dopředu, dokud neuslyšíte zvuk elektromagnetické brzdy. V tomto okamžiku by se měl vozík pohybovat dopředu. Podobně zatlačte nebo zatáhněte za kolébku dozadu / doleva / doprava, invalidní vozík se bude pohybovat dozadu / doleva / doprava.
5. Nastavte tlačítko rychlostní stupnice pro regulativní rychlost jízdy podle stavu vozovky, okolních podmínek a osobních preferencí.
6. Když zastavíte, uvolněte funkční kolébku a ta se otočí do střední polohy. Brzy pak uslyšíte elektromagnetický zvuk, to znamená, že vozík neustále brzdí.
7. Při pohybu vzad věnujte pozornost okolním podmínkám. Pomalu zatáhněte za kolébku dozadu a invalidní vozík se posune dozadu.

Pokyny k loketní opěrce



Tlačítko
loketní opěrky



8-1



8-2



8-3



8-4

Stiskněte a podržte tlačítko loketní opěrky (viz obrázek 8-1) a současně vytáhněte loketní opěrku nahoru o 90° (viz obrázek 8-2)

Znovu nastavte loketní opěrku dolů a dokončete upevnění (viz obrázek 5-3, což je normální stav používání).

Volitelný batoh



Suchý zip ve čtyřech rozích je připevněn k rámu (viz obrázek vpravo), aby byla instalace dokončena, a lze jej také odstranit



Bluetooth dálkové ovládání (pokud máte tuto možnost)



Spárování dálkového ovladače Bluetooth

1. Vložte AAA baterii do rukojeti, zapněte, zelená kontrolka blikne jednou za okamžik
2. Dálkový ovladač ponechte v blízkosti vozíku do jednoho metru, krátce stiskněte „tlačítko napájení“, zelené světlo svítí vždy, poté rychle stiskněte tlačítko „@“, zelené světlo začne pomalu dýchat a vstoupíte do párování (nehýbejte s joystickem během procesu párování)
3. Jakmile je párování úspěšné, zelené světlo bude rychle blikat. Po několika sekundách zapněte křeslo a přejděte do režimu dálkového ovládání. Nyní dálkové ovládání přestane blikat a na 0,5 sekundy se rozsvítí a poté zhasne.

Jak používat dálkové ovládání Bluetooth

1. Stiskněte joystick, můžete ovládat invalidní vozík tak, aby běžel, zastavil a otočil se normálně a kontrolka dálkového ovládání zhasne, krátce stiskněte „velké tlačítko na horní straně“, zazní houkačka, krátce stiskněte „velké tlačítko na spodní strana“, světla se rozsvítí; zelené světlo blikne každých 5 sekund v režimu dálkového ovládání.
2. Krátce stiskněte tlačítko „C“, vozík přejde na nejvyšší rychlost (5) a stiskněte tlačítko „D“, vozík přejde na nejnižší rychlost (2).
3. Krátce nebo dlouze stiskněte „tlačítko napájení“ a uvolněte, kontrolka joysticku invalidního vozíku se vypne a rozsvítí, poté krátce nebo dlouze stiskněte „tlačítko napájení“ a uvolněte jej, kola vozíku se automaticky zapnou za 3-5 sekund.
4. Podle výše uvedených kroků krátce stiskněte nebo podržte „tlačítko napájení“ a uvolněte jej, vozík se vypne. Nyní podržte tlačítko "B", vozík automaticky přejde do režimu skládání a začne se skládat, poté tlačítko uvolněte a krátce stiskněte tlačítko "B", skládání se pozastaví a poté krátce stiskněte "A", vozík se rozloží. Po jeho úplném roztazení krátce stiskněte tlačítko „@“, vozík opustí režim skládání, joystick se vypne a světlo zhasne.

Indikátor dálkového ovládání Bluetooth

1. Krátce nebo dlouze stiskněte tlačítko „Power“ a uvolněte jej, invalidní vozík se zapne, dlouze stiskněte tlačítko „B“, po několika sekundách červené světlo jednou blikne, opustí režim dálkového ovládání a přejde do režimu spánku, krátce stiskněte „tlačítko napájení“, dálkové ovládání se aktivuje, zelené světlo bude rychle blikat, dálkové ovládání po několika sekundách automaticky připojí invalidní vozík a vozík se automaticky zapne.
2. Po zapnutí stiskněte joystick dálkového ovladače Bluetooth a uvolněte jej, od této chvíle asi po 2 minutách dálkové ovládání automaticky přejde do režimu spánku a jednou blikne červená kontrolka.
3. Když je napětí suchého článku lepší než 2,1 V, dálkové ovládání Bluetooth bude ve stavu vybité baterie a - 123 - červená kontrolka bude nadále blikat.