

► Návod k použití

⚠ Bezpečnostní pokyny:

- Tělesná hmotnost uživatele: maximálně 120 kg!
- Vanovou sedačku používejte pouze tehdy, pokud vám pečovatel může pomoci vstoupit, sednout a vstát.
- Sedačku smějí používat pouze lidé, kteří mohou kontrolovat rovnováhu při sezení!
- Jsou-li části vaničky poškozené, ohnuté nebo zdeformované, již je nelze dále používat!
- Všechna 4 opěrná ramena s gumovými zátkami musí pevně spočívat na okraji vany. Před každým použitím zkontrolujte bezpečné uložení!
- Mýdlo a šampon zvyšují riziko uklouznutí!
- Vanová sedačka není vhodná pro dlouhodobé sezení!
- Pro optimální bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat gumové zátky a v případě potřeby je vyměnit!
- K opravám se smí používat pouze originální náhradní díly!

Záruka:

Podle zákonných nároků na záruku.

Vyloučeno ze záruky: Poškození způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a spotřebou, jakož i vady, které mají jen zanedbatelný vliv na hodnotu nebo použitelnost zařízení.

Technické změny a doplňky, jakož i nesprávné údržbářské práce ztratí záruku a odpovědnost za výrobek obecně.

Vyhrazujeme si právo na změny, které slouží technickému vylepšení.

Sedačka do vany »ALUMINIUM«, otočná



► Sedačka do vany »ALUMINIUM«, otočná

Účel:

Otočné sedátko »ALUMINIUM« je určeno výhradně k sezení při mytí / sprchování ve výšce okraje vany.

Použití vany je indikováno v případě funkčního narušení pohybu / držení těla trupu (např. neuromuskulární onemocnění nebo v případě poruch rovnováhy), nedostatečného fungování dolních nebo horních končetin (např. amputace, ochrnutí, onemocnění kloubů, neuromuskulární onemocnění).

Umožňuje čištění těla s dostatečnou sedací kapacitou, případně s podporou pečovatele.


Před prvním použitím:

Před prvním použitím zkontrolujte úplnost a případné poškození.

Montáž:

- Vanová sedačka se dodává předem smontovaná.
- Nejprve se obě opěrky rukou "1" zasunou do příslušných zásevek do strany, až uslyšíte, jak zacvaknou na místo pomocí níže uvedeného tlačítka. Poté zatlačte 4 trubice opěrných ramen "2" do opěrných trubek "3" otočného sedačky. Nyní nastavte přednastavení šířky zatlačením zkumavek dovnitř nebo vytažením, dokud je neslyšíte zacvaknout na místo pomocí tlačítka. Poté toto nastavení opravte pomocí 4 přiložených klipů "4". Nyní je otočné sedadlo se 4 nosnými prvky umístěno na okraji vany a upevněno k vaně otáčením dvou zajišťovacích šroubů "5" ve směru hodinových ručiček.

- Všechna čtyři opěrná ramena musí spočívat na okraji vany s celým gumovým profilem (minimální podpora 5 cm).
- Ujistěte se, že obě strany jsou vytočeny stejně!

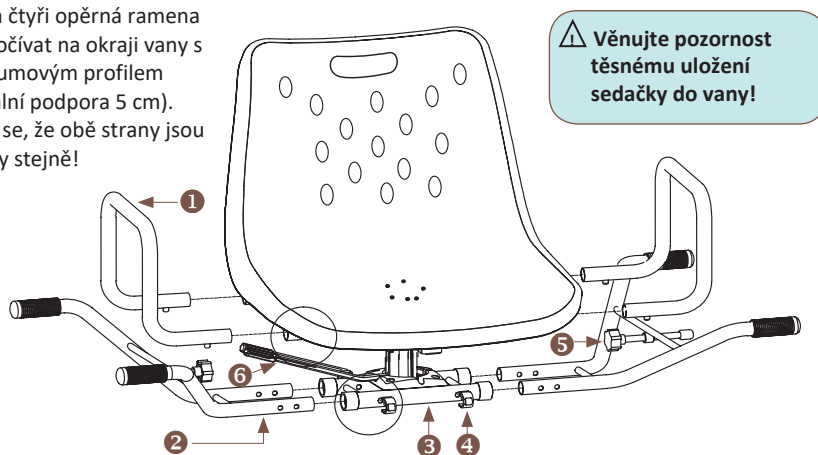

⚠ Věnujte pozornost těsnému uložení sedačky do vany!

Použití:

Před každým použitím musí ošetřovatel zajistit, aby bylo sedadlo vany bezpečné. zkontrolovat. Po sezení / nastoupení zatáhněte za zajišťovací páku "6" a sedadlo otočte do požadované polohy. V tomto okamžiku zacvakněte páku do jednoho ze 4 zářezů. Sedadlo musí být správně zajištěno!

⚠ **Sedejte vždy uprostřed sedačky, jinak hrozí nebezpečí převrácení a uklouznutí!**

Technické údaje:

Číslo produktu 11 200/ sedačka do vany »ALUMINIUM«, otočná			
Materiál:	Rám hliník, potažený, plast skořepiny sedadla	Výška opěradla:	cca 37 cm
Barva:	bílá	max. zatížení:	130 kg
Sedací plocha:	cca 44 x 36 cm	hmotnost:	4,2 kg
Šířka:	cca 53,5 cm	vnitřní šířka vany:	od cca 56 cm do cca 66 cm
Délka:	cca 73,5 cm - 78,5 cm	Nastavitelnost:	90° (4 x) uzamykatelné
Výška:	cca 53 cm		

Životnost:

Koupelnové sedadlo je konstruováno pro životnost 10 let.

Čištění / dezinfekce:

K čištění nepoužívejte ostré nebo drsné předměty ani čisticí prostředky. Nejlepší způsob, jak vyčistit sedačku, je navlhčení hadříkem pomocí běžných jemných domácích čisticích prostředků.

Důležité: Při používání dezinfekčních prostředků je třeba dodržovat pokyny výrobce k použití.